

Használati útmutató

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Kérjük, olvassa el a használati utasítást a készülék üzemeltetése vagy karbantartása előtt. A nem megfelelő műveletek káros sugárzást okozhatnak.

Figyelmeztetések

- A készülék nem vízálló, kérjük, ne használja kádban, zuhanyzóban vagy más olyan helyen, ahol a készülék nedves lehet.
- A készülék működési környezete 5°C-30°C. Használat előtt ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét, és gondoskodjon arról, hogy a működési környezet tiszta, pormentes és jól szellőző legyen. Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben.
- A szemsérülés elkerülése érdekében ne használja a készüléket a szem körül.
- A kezelés után kapcsolja ki a készüléket, ne hagyja felügyelet nélkül.
- Csak a gyártó által felhatalmazott személyzet végezheti el a műszer javítását és a termék belső karbantartását, különösen a belső ellenőrzést, beleértve a tápegység és az optikai alkatrészek belső beállítását.
- Ne használja a készüléket olyan tárgyak közelében, amelyek elektromágneses interferenciát kelthetnek, mint például a hordozható és mobil rádiófrekvenciás elektromágneses sugárzás, mint a mobiltelefonok, amelyek befolyásolhatják a készülék használatát.
- A termék várható élettartama 5 év. A termék biztonsága és megbízhatósága érdekében ne használja a készüléket a szervizidőn túl.
- Kérjük, a készülék élettartama végén a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelően kezelje.

Óvintézkedések

- Kettős kimeneti DC 5V, 2A szükséges az adapterhez a készülék töltéséhez.
 - Ne nézzen közvetlenül a lézerfénybe, ne irányítsa azt mások szemébe!
 - A szemsérülések elkerülése érdekében tartsa távol a készüléket gyermekektől.
 - A pacemaker használók számára tilos a használat, mivel a készülék zavarhatja a szívritmus-szabályozó működését
-

Ellenjavallatok

A készüléket nem szabad használni, ha az alábbiakban felsorolt valamelyik fennáll:

- Ne használja a készüléket, ha cukorbeteg.
- A készüléket terhes nők nem használhatják.
- Ne használja a készüléket, ha véralvadási zavarai vannak.
- Ne használja a készüléket, ha rosszindulatú bőrelváltozásai vannak.
- Ne használja a készüléket, ha epilepsziája vagy napkütése volt.
- Ne használja a készüléket, ha 810 nm-es dióda lézerre érzékeny gyógyszereket használ.
- Ne használja a készüléket, ha a bőr leégett, és a kezelés után nem tudja elkerülni a napsugárzást.

Termék bemutatása

A készülék a vérkeringés javítására, a gyulladás és fájdalom csökkentésére, sebek gyógyítására és a testfunkciók serkentésére szolgál.

A kínai orvoslás akupunktúra elméletéből és a „fényakupunktúrás” terápiából fejlesztették ki, amely az orvostudományban alkalmazott alacsony intenzitású lézereket és a TCM elméletén alapuló akupunktúrás stimulációt egyesíti, hogy fiziológiai és biokémiai változást generáljon, így funkcióit károsodás nélkül érje el.


Készülék és tartozékai

Készülék

Mágneses lencse

C típusú USB kábel Amerikai töltő Európai töltő

Töltöttség ikon		Idő
LED kijelző		Pulzáló mód
Energia csökkentése		Energia növelése
Program gomb		Idő beállítása
Teljesítmény szint		

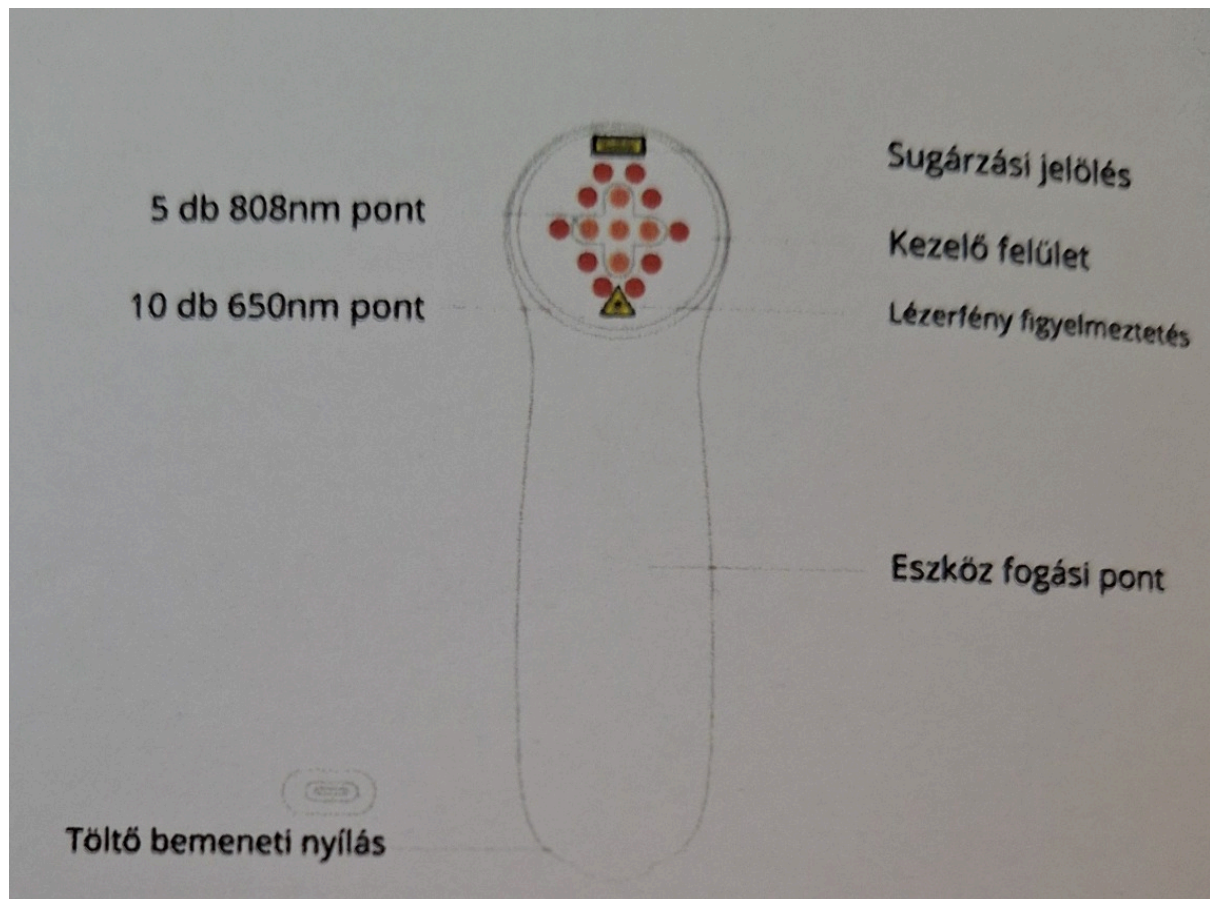

5 db 808nm pont
 10 db 650nm pont
 Sugárzási jelölés

Kezelő felület
 Lézerfény figyelmeztetés
 Eszköz fogási pont
 Töltő bemeneti nyílás

Jelek

Az EN60825-1 szabvány szerint minden 3-as osztályú lézertermékhez sugárzásra figyelmeztető táblát és sugárzási nyilatkozatot kell mellékelni.



Sugárzásra figyelmeztető jel



Sugárzási nyilatkozat



Tilos a kommunális
hulladékba juttatni.



CE jelölés



Száraz helyen tárolandó



Kerülje a szárazságot



Törékeny



Felállítva tárolandó

- Sugárzásra figyelmeztető jel
- Sugárzási nyilatkozat
- Tilos a kommunális hulladékba juttatni.


- CE jelölés
- Száraz helyen tárolandó
- Kerülje a szárazságot
- Törékeny
- Felállítva tárolandó

Műszaki adatok

Lézer	GaAlAs félvezető
Hullámhossz	808nm±20nm (5db) + 650nm±20nm (10db)
Maximálisan leadható teljesítmény 808nm pontonként	250mW±20%
Maximálisan leadható teljesítmény 650nm pontonként	5mW±20%
Teljes leadható teljesítmény	1300mW±20%
Programok	Folyamatos/pulzáló
Idő beállítása	5-60 perc 5 perc szünettel
Akkumulátor kapacitás	5000mAh lítium akkumulátor
Töltés	C-típusú USB, DC5V, 2A
Tárolási hőmérséklet	5°C~30°C
Ideális páratartalom	20~80%
Töltő kimeneti teljesítmény	5V-2A
Töltő erőssége	100-240V
Súly	270g±5g

Nyomja meg a „Óra” ikonú gombot röviden a kezelési idő beállításához. Az idő 5 perccel nő, a kezelési idő 5-60 perc között állítható (3. ábra).


Ha megnyomja a „TIME” gombot, az hangjelzéssel jelez, és az óra ikon megváltozik a LED képernyőn.

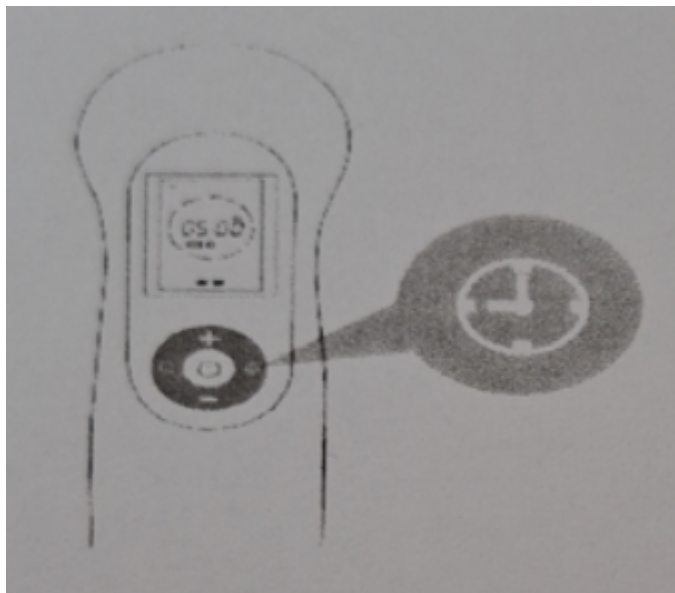

Nyomja meg röviden a „Mode” / „Mód” gombot a munkamód beállításához (Az alapértelmezett munkamód a folyamatos üzemmód.) (4. ábra).

Ha röviden megnyomja a „Mode” / „Mód” gombot, a hangjelzés kétszer „ketyeg”, és az üzemmód folyamatos üzemmódról pulzáló üzemmódra vált, a képernyőn látható ikonnal (5. ábra).

Megjegyzés: Ha nincs szüksége a kezelési idő vagy mód megváltoztatására, kérjük, röviden nyomja meg közvetlenül a "Power" gombot, ekkor a készülék a memória módnak megfelelően elkezd a működést.

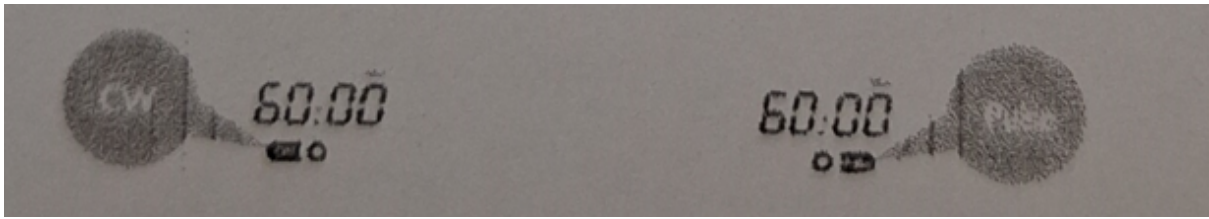

Folyamatos mód

Dupla mód


Teljesítményszint beállítása

Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a lézer kimeneti teljesítményének intenzitásának beállításához. A lézerkimeneti intenzitásnak három szintje van.

- Nyomja meg a „+” gombot az energiaszint növeléséhez.
- Nyomja meg a „-” gombot az energiaszint csökkentéséhez.

A „+” vagy a „-” megnyomásakor a készülék berregő hangot ad ki és a megfelelő ikon megváltozik a képernyőn.

Megjegyzés: Ha nincs szükség a kezelési idő vagy mód módosítására, nyomja meg röviden közvetlenül a "Power" gombot, ekkor a készülék a memória módnak megfelelően elkezd működni.

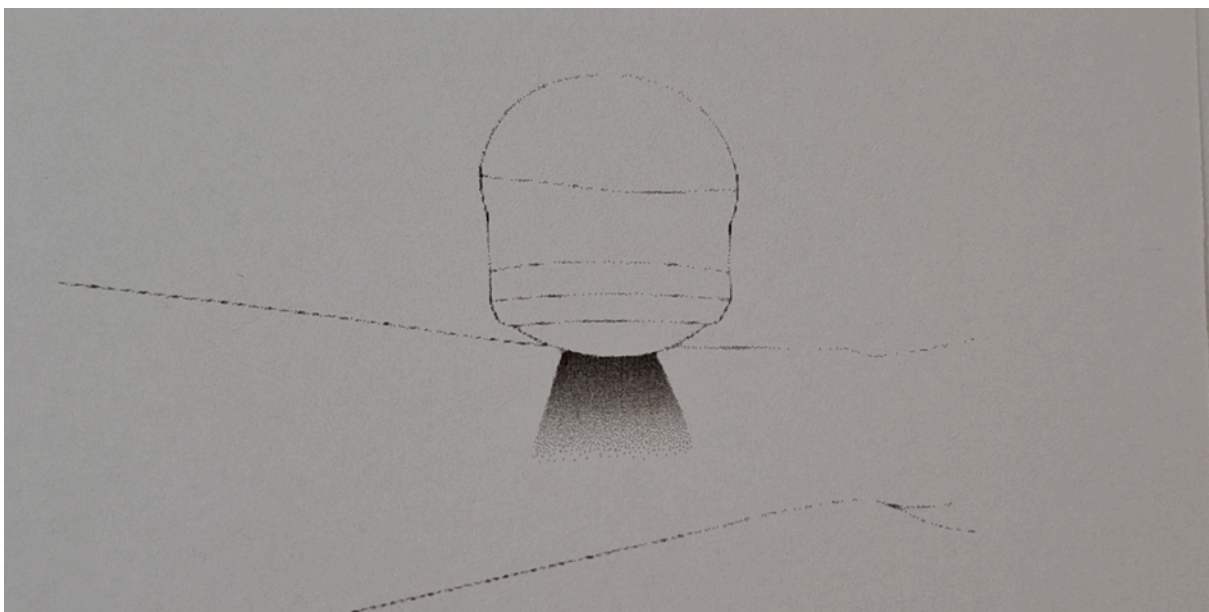


(6. ábra)

A kezelés megkezdése és szüneteltetése

A kezelési mód és a kezelési idő beállítása után nyomja meg röviden a "Power" gombot, és a készülék elindul. Ezzel egy időben a kijelzőn az idő visszaszámlálása megkezdődik (7. ábra).

Amikor a kezelés befejeződött, a készülék hangot ad, a LED képernyő visszatér a beállítási állapotba, a lézer fénye pedig megszűnik.

Ha a készüléket szüneteltetni kell a kezelés folyamán, röviden nyomja meg a "Power" gombot. Hangjelzés hallható, majd az időjelzés és a lézer fénye szünetel.

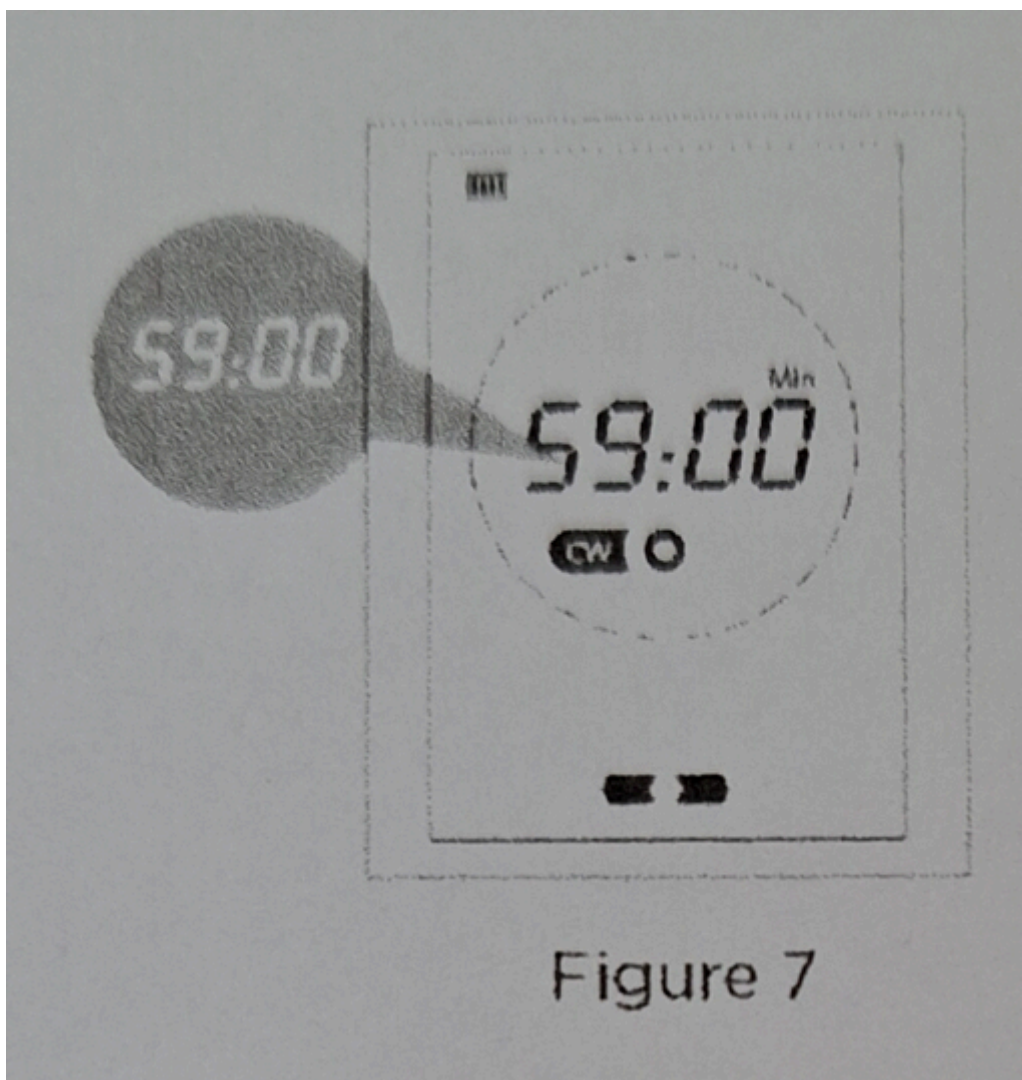

(7. ábra)

Megjegyzés:

1. A kezelési idő és a teljesítményszint nem állítható be a kezelési folyamat

során. Kérjük először, állítsa le a lézerkibocsátást (nyomja meg röviden a „Bekapcsoló” gombot) a beállítás előtt.

2. A kezelési mód a kezelési folyamat során állítható. Kérjük, nyomja meg a „Mode” / “Mód” gombot.

Kikapcsolás

A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 2 másodpercig a „Bekapcsoló” gombot. A kikapcsolt állapotba kerülésről a készülék hangvisszajelzést is ad.

Megjegyzés: A készülék automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik az energiatakarékosság érdekében. A készülék 120 másodperc után automatikusan kikapcsol.

Karbantartás

- Ha a készülék meghibásodik, ellenőrizze és térképezze fel a problémát a „Hibaelhárítási utasítások” szerint. Ha a problémát nem lehet megoldani, forduljon az értékesítőhöz. A készüléket semmi képpen se szedje szét vagy kezdje megjavítani. Ez a garanciavesztés mellet az Ön és környezete számára is veszélyt jelenthet..
- A készülék szennyezett felületének tisztításához használjon semleges tisztító folyadékba mártott rongyot. Ne használjon szerves oldószert a tisztításhoz.
- A fénykibocsátó lencsék tisztításához használjon alkoholba mártott rongyot. Szigorúan tilos bármilyen folyadékba áztatni a készüléket.
- Tartsa távol a készüléket nedvességtől, magas hőmérséklettől és közvetlen napfénytől, hogy elkerülje a belső alkatrészek elöregedését és az élettartam lerövidülését.
- Kérjük, ne tegye a készüléket kemény, éles tárgyak közelébe, hogy elkerülje a felület megkarcolását vagy a készülék károsodását.
- A töltési időnek több mint 10 órának kell lennie az első három alkalommal.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük abban az esetben is, legalább 4-6 havonta töltse fel, ez fontos az akkumulátor karbantartása szempontjából.

Lehetséges problémák

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.	Nem megfelelő ideig nyomta a bekapcsoló gombot. / Alacsony töltöttség.	Nyomja hosszan a bekapcsoló gombot. / Töltse fel a készüléket.

Nem vagy gyengén világítanak a lámpák.	Meghibásodott lézer.	NE használja tovább a készüléket. Keresse fel az értékesítőt.
A készülék feltűnően melegszik.	Túl sokáig volt üzemeltetve.	Kapcsolja ki és várja meg, amíg lehűl a készülék.
Törés vagy repedés a készüléken vagy a kezelő fejen.	-	NE használja tovább a készüléket, keresse fel az értékesítőt.

Garanciális ügyintézés

Kérjük olvassa el weboldalunk ÁSZF-jét a teljes körű garanciális feltételeket illetően, jelen tájékoztató csak egy általános felvilágosítást, nem foglal magába minden feltételt. Visszaküldés előtt kérem mindenképpen egyeztessen a webáruház üzemeltetőjével.

- A garanciális ügyintézés ingyenes, azonban a termék vissza juttatásáról az ügyfélnek kell gondoskodnia.
- Amennyiben a garancia időtartamán belül - megfelelő használat mellett - javíthatatlanná válik a készülék, azt kicseréljük.
- Ha a készülék nem cserélhető, visszafizetjük a vételárat.
- Nem áll módunkban cserét biztosítani:
 - Amennyiben nincs jótállási jegy vagy számlával nem tudja igazolni a vásárlást.
 - Nem megfelelő használatból vagy gondatlanságból eredő károk.
 - Baleset vagy emberi tevékenység által okozott meghibásodások vagy károk (karcolások, beázás vagy az alkatrészek jogosulatlan cseréje).
 - Természeti katasztrófák által okozott károk.

Az ügyintézés megkezdése esetén kérem az alábbi adatokat feltüntetni elektronikus vagy írott formában:

A vásárlás időpontja:

A vásárláshoz tartozó számlaszám:

A garancia érvényessége: